

1. ガスバーナー

()に適当な語句や数字を入れるか、または選びなさい。

1 2つのねじが閉じていることを確認する。
(安全のため)

2 ①()を開く
コックつきのものはコックも開く

3 マッチに火をつける。

4 マッチの火をガスの点火口に近づけ、
②(空気 ・ ガス) 調節ねじを
少しずつ開きながら点火する。

③(空気 ・ ガス)
調節ねじ

④(空気 ・ ガス) 調節ねじ


5 ⑤(空気 ・ ガス) 調節ねじを
開いて⑥(赤 ・ 黄 ・ 青) 色の
炎になるように調節する。

注意

空気調節ねじを開くときは、ガス調節ねじをしっかりと押さえておく。

2. アルコールランプ

■火をつけるとき

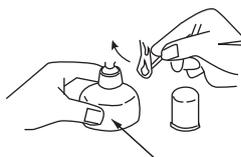

マッチの火は
①(上 ・ 下)
から近づける。

アルコールは7～8分目

■火を消すとき




火は②(息をふきかけて ・
ふたをかぶせて) 消す。

3. 試験管の熱し方

液の量は試験管の
①() 分の1～
②() 分の1
[安全のため]

④(ゆっくりと ・
こきざみに) 振る

突沸を防ぐために
③() を入れる

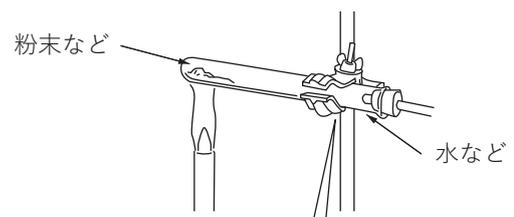

試験管の口を少し
⑤(上げる ・ 下げる)

[発生した水などが底の加熱部分に流れ、
試験管が⑥() のを防ぐため]